




Prefert®

Żel dopochwowy dla kobiet
starających się o dziecko
Vaginální gel při přání otěhotnět
Vaginálny gél pri plánovaní
tehotenstva
Vaginalni gel pri želji po otrocih

Medintim

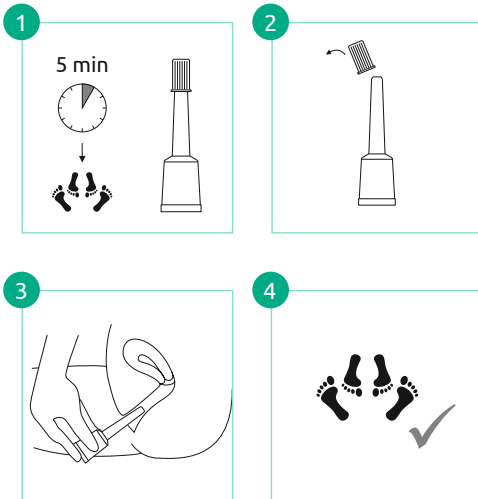

Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi stosowania!

Préd použitím si přečtete pokyny k použití!

Préd použitím si prečítajte pokyny na používanie!

Préd uporabo preberite navodila za uporabo!

Polski

Żel dopochwowy **Prefert®** dla kobiet starających się o dziecko

Sposób działania:

Żel dopochwowy Prefert® tworzy środowisko, w którym plemniki mogą optymalnie przemieszczać się do komórki jajowej.

Dzięki swoim właściwościom osmotycznym zapewnia optymalną ilość miejsca do ruchu. Wspomaga ruchliwość plemników i jest dla nich idealną pomocą, by mogły dotrzeć do komórki jajowej.

Dzięki neutralnemu pH 7,2 żel dopochwowy Prefert chroni plemniki przed zbyt kwaśnym środowiskiem i zapewnia ich przeżycie.

Żel dopochwowy Prefert® poprawia ruchliwość plemników w porównaniu do klasycznych, rozpuszczalnych w wodzie lubrykantów.

Czas stosowania:

Do tymczasowego stosowania w trzech najbardziej płodnych dniach żeńskiego cyklu (moment owulacji).

Stosować tylko raz na 24 godziny.

Skład:

Woda oczyszczona, chlorek sodu, fosforan sodu, fosforan potasu, arabinogalaktan, hydroksyetyloceluloza, poliheksanid

Zastosowanie:

Wprowadzić 5 minut przed stosunkiem płciowym.

1. Przed stosunkiem płciowym wyjąć z opakowania jednorazowy aplikator z żelem dopochwowym Prefert®.

2. Zdjąć zatyczkę.

3. Wprowadzić aplikator dopochwowy do pochwy. Ścisnąć aplikator w celu wprowadzenia żelu. Wyjąć aplikator.

4. Teraz można odbyć stosunek płciowy.

Zawartość opakowania wystarcza na 8 zastosowań.

Po użyciu usunąć pusty aplikator do pojemnika na domowe odpady.

Nie zawiera parabenów.

Wskazówki:

W razie wystąpienia podrażnień w trakcie stosowania żelu dopochwowego Prefert® należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować żelu dopochwowego Prefert® w przypadku niedawno przebytego zabiegu w okolicy pochwy lub ostrej infekcji pochwy.

Čeština

Vaginální gel **Prefert®** při přání otěhotnět

Mechanismus působení:

Vaginální gel Prefert® zajišťuje prostředí, v němž se spermie mohou optimálně pohybovat k vajíčku.

Jeho osmotické vlastnosti poskytují optimální prostor pro pohyb. To podporuje pohyblivost spermií a představuje to ideální pomoc pro úspěšnou cestu k vajíčku.

Prefert s neutrální hodnotou pH 7,2 chrání spermie před příliš kyselým prostředím a zajišťuje tak jejich přežití.

Vaginální gel Prefert® zlepšuje pohyblivost spermií v porovnání s klasickými lubrikanty rozpustnými ve vodě.

Doba používání:

K přechodnému používání ve třech plodných dnech ženského cyklu (doba ovulace).

Používejte pouze jedenkrát za 24 hodin.

Složky:

Purifikovaná voda, chlorid sodný, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, arabinogalaktan, hydroxyethylcelulóza, polyhexanid

Použití:

Zavést 5 minut před pohlavním stykem.

1. Před pohlavním stykem vyjměte jednorázový aplikátor s vaginálním gelem Prefert® z obalu.

2. Odstraňte uzavírací krytku.

3. Zaveďte vaginální aplikátor do pochvy. Zatlačte aplikátor k sobě pro zavedení gelu. Odstraňte aplikátor.

4. Nyní můžete mít pohlavní styk.

Obsah balení stačí pro 8 použití.

Prázdný aplikátor po použití zlikvidujte s domácím odpadem.

Neobsahuje parabeny.

Upozornění:

Pokud u vás dojde při použití vaginálního gelu Prefert® k podráždění, přestaňte jej používat a zeptejte se své lékařky nebo svého lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vaginální gel Prefert® nepoužívejte, pokud jste před krátkou dobou absolvovala vaginální zákrok nebo jste měla akutní vaginální infekci.

Prefert® vaginalny gél pri plánovaní tehotenstva

Spôsob účinku:

Prefert® vaginalny gél vytvára prostredie, v ktorom sa spermie môžu optimálne pohybovať k vajíčku.

Jeho osmotické vlastnosti poskytujú optimálne prostredie na pohyb. To podporuje pohyblivosť spermií a je ideálnou pomôckou pre úspešnú cestu k vajíčku.

S neutrálnou hodnotou pH 7,2 chráni Prefert® spermie pred kyslým prostredím a zabezpečuje tak ich prežitie.

Prefert® vaginalny gél zlepšuje pohyblivosť spermií v porovnaní s klasickými, vodorozpustnými lubrikačnými prípravkami.

Čas použitia :

Na dočasné použitie počas troch najplodnejších dní ženského cyklu (čas ovulácie).

Používajte len jedenkrát za 24 hodín.

Zložky:

Čistená voda, chlorid sodný, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, arabinogalaktan, hydroxyetylcelulóza, polyhexanid

Použitie:

Zavedte 5 minút pred pohlavným stykom

1. Pred pohlavným stykom vyberte jeden jednorazový aplikátor Prefert® vaginalny gél z balenia.
2. Odstráňte krycie viečko.
3. Zaveďte vaginalny aplikátor do pošvy. Na zavedenie gélu stlačte aplikátor. Aplikátor vyberte.
4. Teraz môžete mať pohlavný styk.

Obsah balenia stačí na 8 použití.

Po použití zlikvidujte prázdny aplikátor v domovom odpade.

Neobsahuje parabény.

Poznámky:

Ak sa u vás pri používaní Prefert® vaginalneho gélu objaví podráždenie, ukončite používanie a poraďte sa so svojou lekárou alebo lekárom.

Uchovávajte na mieste nedostupnom pre deti.

Nepoužívajte Prefert® vaginalny gél, ak ste mali krátko predtým zásah vo vagíne alebo ak máte vaginálnu infekciu.

Vaginalni gel Prefert® pri želji po otrocih

Način delovanja

Vaginalni gel Prefert® ustvari okolje, v katerem se lahko spermiji optimalno premikajo k jajčnim celicam.

Osmotske lastnosti zagotavljajo optimalen prostor za premikanje. To spodbuja gibljivost spermijev in je idealen pripomoček za uspešno pot do jajčne celice.

Z nevtralno vrednostjo pH 7,2 zagotavlja zaščito spermijev pred kislino okolico in s tem njihovo preživetje.

Vaginalni gel Prefert® izboljša gibljivost spermijev v primerjavi s klasičnimi, vodotopnimi lubrikanti.

Čas uporabe:

Začasno uporabo na najbolj plodnih dneh ženskega cikla (čas ovulacije).

Uporabite le enkrat v 24-ih urah.

Sestavine:

Prečiščena voda, natrijev klorid, natrijev fosfat, kalijev fosfat, arabino-galaktan, hidroksiethylceluloza, poliheksanidi

Uporaba:

Uvedite 5 minut pred spolnim odnosom.

1. Pred spolnim odnosom vzemite aplikator vaginalni gel Prefert® iz ovojnice.
2. Odstranite pokrovček.
3. Vaginalni aplikator uvedite v nožnico. Stisnite aplikator, da uvedete gel. Odstranite aplikator.
4. Sedaj lahko imate spolni odnos.

Vsebina ovojnine zadošča za 8 uporab.

Po uporabi odstranite aplikator z gospodinjskimi odpadki.

Ne vsebuje parabenov.

Napotki:

Če vas uporaba vaginalnega gela Prefert® draži, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Shranjujte otrokom nedosegljivo.

Vaginalnega gela Prefert® ne uporabljajte, če ste imeli pred kratkim vaginalni poseg ali imate akutno vaginalno okužbo.



Nie używać ponownie | K jednorazowemu użyciu | Nieponowić opakowanie | Ni za ponovno uporabo



Odpady | Odpad | Odpad | Odpadek



Chronić przed wilgocią | Chraňte před vlhkem | Chránite pred vlhkostjo | Zaščitite pred vlago



Zakres temperatur | Teplotní omezení | Teplotné limity | Temperaturne omejitve



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

www.medintim.de



Made in Germany



GEL PREFERT® E



Prefert®

Vaginal Gel

free of
silicones,
parabens &
mineral
oils

Wyrób medyczny dla kobiet starających się o dziecko do stosowania w domu w trakcie owulacji
Zdravotnický prostředek při přání otěhotnět v průběhu ovulace pro domácí použití
Zdravotnická pomůcka při plánování tehotenstva na domácí použití počas ovulácie
Medicinski izdelek za uporabo doma med ovulacijo pri želji po otrocih

www.prefert.com

Medintim